

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Максимальный
вес



ЖК-
дисплей

Весы напольные
диагностические
Арт. 252-096



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования в соответствии с данной инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем либо проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Внимание! Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т. к. это может привести к их поломке. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Предохраняйте прибор от падений, ударов и механических повреждений.
- Не прыгайте на весах.
- Во избежание повреждения тензодатчиков не бросайте на весы тяжелые предметы.
- Не перегружайте весы! Максимальный допустимый вес – 180 кг.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Храните батарейки и весы в недоступном для детей месте. Лицу, проглотившему батарейку, следует немедленно обратиться к врачу. При попадании в пищеварительный тракт батарейки могут представлять опасность для жизни.
- Запрещается заряжать или иным способом восстанавливать батарейки, разбирать их, бросать в огонь.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Данные весы работают по принципу анализа биоэлектрического сопротивления (BIA). При этом определение процентного содержания различных тканей происходит всего за несколько секунд с помощью неощутимого человеком безопасного электрического тока.
- При измерении важно учитывать следующее: измерение процентного содержания жировой ткани нужно проводить только босиком; подошвы стоп целесообразно слегка увлажнить. Абсолютно сухие подошвы могут стать причиной недостоверного результата, так как имеют слишком низкую электрическую проводимость.
- Если при измерении процентного соотношения жира, мышечной ткани, костной массы и воды сумма процентов всех компонентов получилась больше 100%, это не является браком весов. Данное явление можно объяснить с физиологической точки зрения. Работа диагностических весов основана на биоимпедансном анализе, выявляющем количество жира и воды, которые содержатся и в самих мышечных и костных тканях. Таким образом, динамике изменений различных показателей следует рассматривать отдельно по каждому показателю, не суммируя полученные результаты.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип весов: диагностические
- Максимальная нагрузка: 180 кг
- Цифровой дисплей
- Индикация перегрузки
- Отображение уровня заряда батареек
- Отображение температуры воздуха
- Приложение для Android/iOS
- Беспроводное подключение
- Материал платформы: стекло
- Питание: от батареек 2×AAA
- Степень защиты: IP20
- Напряжение: 3 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Весы напольные
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

1. Дисплей
2. Платформа
3. Отсек для батареек
4. Корпус
5. Сброс настроек/измерение температуры
6. Ножки

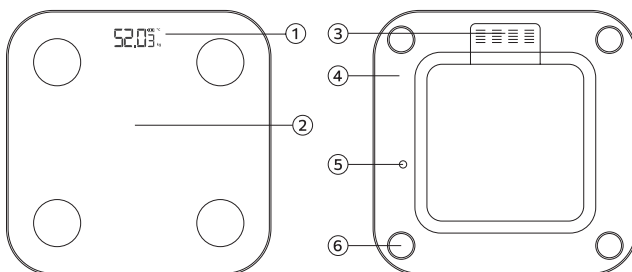


Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

ВЗВЕШИВАНИЕ

- Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой горизонтальной поверхности. Не устанавливайте весы на ковер или мягкие поверхности.
- Для точного определения веса желательно, чтобы весы стояли в одном и том же месте. Перемещая весы, вы рискуете установить их на неровную поверхность, что может повлиять на точность.
- Для точного определения веса необходимо взвешиваться в одно и то же время, сняв одежду и обувь, до принятия пищи.
- Нежелательно измерять вес раньше, чем через 2 часа после пробуждения.
- Встаньте на весы. Ни к чему не прислоняйтесь, стойте прямо.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите батарейки. Для этого откройте крышку и вставьте батарейки так, как показано на картинке. Закройте крышку. Во время взвешивания стойте неподвижно, чтобы показания стабилизировались.

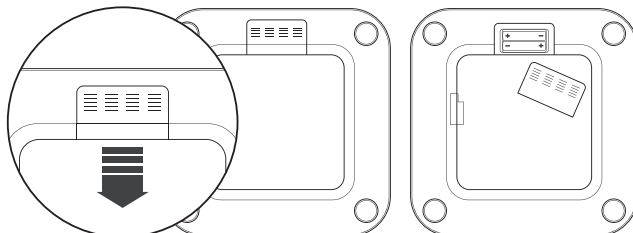

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

2. Установите приложение «OKOK International».

Внимание! Перед установкой приложения убедитесь, что у вас включено беспроводное подключение. Для корректной работы приложения рекомендуем использовать беспроводное подключение 4.0 и выше.

Ваше устройство должно соответствовать следующим требованиям:

iOS 7.0 и выше

Android 4.3 и выше

3. Разместите весы на ровной, твердой поверхности.

4. Встаньте на весы.


Важно! Встаньте в центр весов обеими ногами, чтобы весы не перевернулись в процессе взвешивания.

Стойте на весах не менее 10 секунд, если вы хотите получить сведения о проценте жировой ткани.

5. Взвешивание завершится, когда цифры на дисплее начнут мигать. Чтобы посмотреть полученные показатели, используйте приложение на мобильном телефоне. Кроме веса, на дисплее отображается заряд батареи и температура. Чтобы посмотреть температуру, нажмите кнопку на корпусе устройства. Длительное нажатие отвечает за отображение температуры, короткое – сбрасывает настройки.

Примечание: полученные в процессе взвешивания данные носят справочный характер и не могут служить основанием для медицинских рекомендаций.

6. Через некоторое время весы автоматически выключатся.

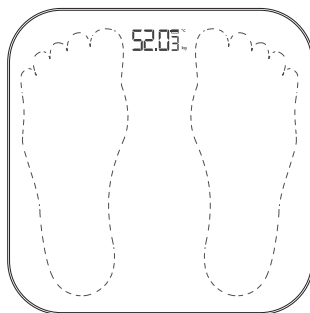

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Включите беспроводное соединение.

2. Для удобства отсканируйте QR-код или скачайте приложение «OKOK International» в App Store/Google Play.



Google Play



App Store






OKOK Healthcare



LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ


3. Подключите устройство к приложению и зарегистрируйтесь.
Заполните информацию о пользователе.

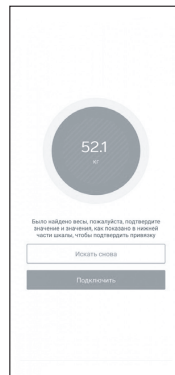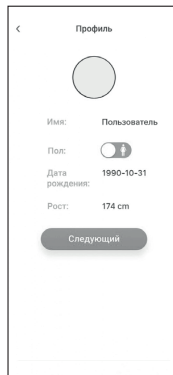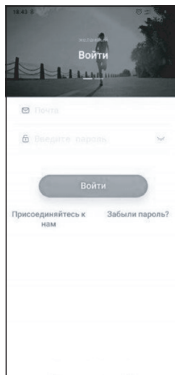

4. Перейдите в интерфейс «Динамика».
Встаньте на весы и синхронизируйте данные о весе с приложением.

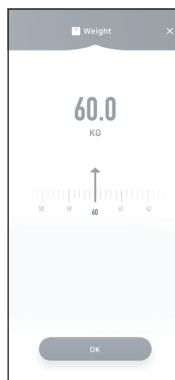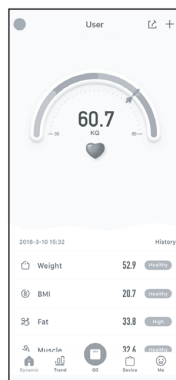

5. Перейдите в интерфейс «Тренд».
Здесь вы можете посмотреть результаты взвешивания и динамику изменения веса.

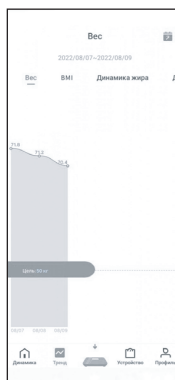



ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Мгновенное взвешивание

Приложение автоматически синхронизируется с весами. Здесь вы можете следить за такими показателями, как вес, содержание воды в организме, процентное соотношение жировой, костной и мышечной тканей, ИМТ.

2. Память

В приложении вы можете отслеживать изменение веса нескольких пользователей. Если вы пользуетесь весами без приложения, все результаты будут сохранены в памяти весов. После вы сможете синхронизировать их с приложением, подключив его через беспроводное соединение.

3. Отчет об изменениях веса

Приложение формирует еженедельный, ежемесячный и ежеквартальный отчет, который показывает изменение веса в течение заданного периода.

Примечание: в приложении вы можете поменять единицы измерения на фунты и стоуны. По умолчанию весы вычисляют массу в килограммах.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Если на дисплее начнет мигать буква «L», необходимо заменить батарейки.

Важно! Когда батарейки начнут разряжаться, извлеките их из батарейного отсека, чтобы избежать протечки.

При перегрузке весов во время взвешивания на дисплее начнут мигать буквы «OL». Максимально допустимый вес – 180 кг.

ХРАНЕНИЕ

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы слегка влажной тканью.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте под струей воды.
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов элементы питания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не ставьте весы на мокрый пол. Если стекло мокрое, протрите его сухой салфеткой, чтобы не поскользнуться.
2. Так как платформа сделана из стекла, обращайтесь с ней бережно. При падении или ударе стекло может разбиться и травмировать пользователя.
3. При чистке весов используйте мягкую ткань. Не пользуйтесь органическими растворителями и химическими веществами.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/ низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях. В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Срок службы: 5 лет. Гарантийный срок: 1 год. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае.
Изготовитель: Цзянсу Сэйнти Машинери Имп & Эксп Ко., Лтд. Адрес: Билдинг С, 21 Софтвер Авеню, Нанцзин, Китай.





ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Весы напольные электронные

Модель: 286-096

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.